

MultimatEasy



L'essenziale

Un risultato di maturità

DENTSPLY

L'essenziale

Un risultato di maturità

Solo chi lavora costantemente al proprio settore di competenza può migliorarsi: per questo la nostra serie di forni già testata e comprovata è stata ulteriormente perfezionata con prestazioni ancora maggiori e opzioni di comando ancora più semplificate. Nasce così Multimat Easy che, nella dotazione tecnica, soddisfa i requisiti dei processi di lavoro eseguiti quotidianamente in laboratorio. Consente un risparmio di spazio grazie alle sue dimensioni compatte ed è ideale per piccoli laboratori, laboratori di studi dentistici oppure anche come secondo forno.



Display

L'interfaccia utente di nuova configurazione consente una facile panoramica di tutte le funzioni rilevanti grazie alla sua estrema funzionalità. Il display alfanumerico a due righe visualizza le informazioni importanti per l'intero processo di cottura della ceramica.




Tecnologia

Stato dell'arte: la comprovata muffola a spirale abbinata ad un vetro di quarzo garantisce una distribuzione omogenea del calore all'interno della camera di cottura. Ciò appare evidente nel risultato di cottura: qualità costante e sicura, riproducibile in qualsiasi momento.



Scheda

Tecnologia a processore all'avanguardia, rapidi tempi di reazione grazie all'elevata frequenza, moderna tecnica a sensori, monitoraggio integrato della temperatura: tutti questi particolari rendono le applicazioni di Multimat Easy ancora più sicure. Grazie alla porta USB è possibile aggiornare senza problemi Multimat Easy alla versione più recente del software.

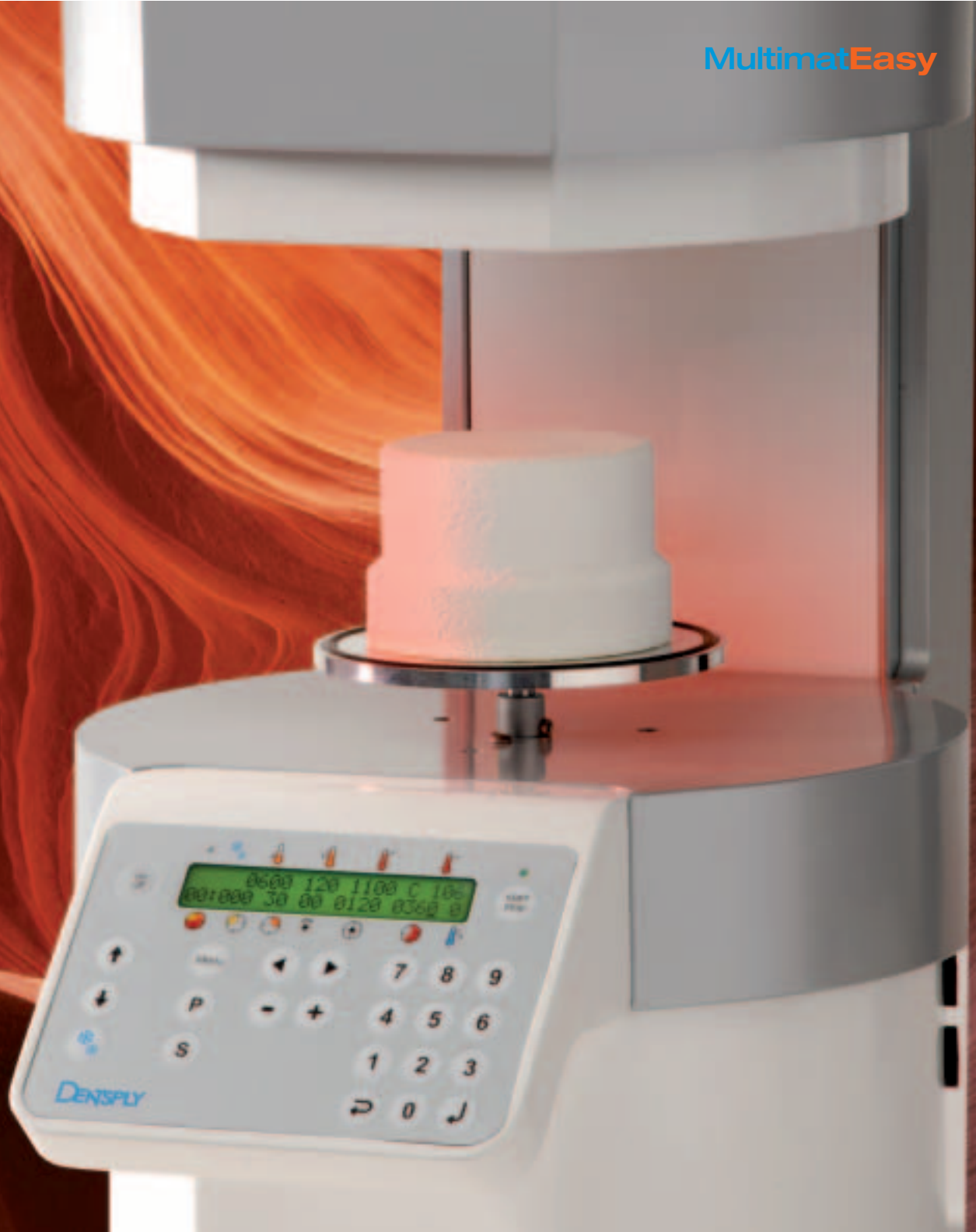

Dimensioni

Multimat Easy colpisce per la sua struttura compatta e la superficie occupata estremamente ridotta. Su richiesta, è possibile ampliare la superficie d'appoggio mediante ripiani magnetici di forma ergonomica (accessori) in funzione delle esigenze personali.

Programmi

100 posizioni di memoria offrono una gestione chiara sia dei programmi standard che dei programmi per ceramica personalizzati. Per raffreddare la ceramica utilizzata sono disponibili tre livelli di raffreddamento. Naturalmente le fasi del processo possono essere modificate in qualsiasi momento durante la cottura.

Sicurezza

Multimat Easy è provvisto fra l'altro di un sistema che consente di mantenere, in caso di brevi interruzioni di rete, i dati programmati permettendo in tal modo di continuare la cottura senza problemi. Inoltre, determinati programmi di cottura possono essere salvati su una pen drive USB.



MultimatEasy

- Esatto controllo della temperatura
- Struttura compatta, superficie ridotta
- Sequenza di cottura sicura, tecnologia all'avanguardia
- Facile utilizzo
- 100 programmi
- Chiaro display a due righe
- Porta USB per aggiornamenti software e back up dei dati
- Facile manutenzione

MultimatEasy

Altezza: circa 605 mm
Larghezza: circa 278 mm
Profondità: circa 422 mm
Peso: circa 22 kg

Tensione: 110 – 125 V
230 – 240 V
Frequenza: 50 – 60 Hz
Potenza: 1.300 W (senza pompa)

Accessori:	Art. n° 54 6026 0100	Ripiano magnetico, bilaterale (90°)
	Art. n° D 03 532 803	Set di calibrazione in argento
	Art. n° D 03 002 220 VD	Pompa per vuoto Biodent

Con riserva di modifiche tecniche senza preavviso