

Vi presentiamo il nuovo concetto Kiss.
Semplice e sicuro,
praticamente perfetto.

Duceram

Keep it simple and safe.



DeguDent

A Dentsply International Company

Semplicità di lavorazione.



4.

Degudent Kiss, la lega ad alto contenuto aureo con palladio, è straordinariamente resistente, nonché semplice e sicura nella lavorazione.

- tempo di raffreddamento ridotto grazie al basso CDT
- elevata resistenza alla deformazione; ideale per ricostruzioni estese su impianti
- possibilità di cicli di cottura rapidi
- ponti di qualsiasi estensione
- ossidazione chiara

5.

BiOclus HT, la lega biocompatibile collaudata e resistente viene utilizzata da anni con successo, è priva di palladio e rame ed ha un'intensa colorazione giallo oro. Keep it simple and safe:

- fusione semplice e sicura
- semplice da lucidare
- decapaggio semplice e veloce
- ampio spettro di indicazioni
- ossidazione chiara

6.

Keep it simple and safe, su questo slogan si è basata anche l'ideazione della scala colori Kiss, un sistema che consente una rapida e semplice assegnazione delle masse ceramiche Kiss in base ai colori V-Shade.

Selezionando il colore V-Shade desiderato, nei cinque campi inferiori vengono visualizzate automaticamente tutte le altre associazioni cromatiche.


Il dosatore Kiss è la logica estensione della scala colori, che prevede rapporti di miscelazione 1:1 per la stratificazione individuale, ad esempio per le Power Chroma. L'impiego del dosatore consente una miscelazione predefinita di due masse con perfetta riproducibilità.

Semplice e sicuro.



Sei buoni motivi per scegliere il concetto Kiss

1.

 **Duceram Kiss** è la nuova ceramica ad alto punto di fusione con CDT nel tradizionale range 13,8 – 15,4 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$.

Riducendo il numero delle masse ceramiche a 73, Duceram Kiss stabilisce un nuovo standard funzionale. E chi presume che ciò vada a discapito della bellezza, rimarrà piacevolmente sorpreso, perché l'affidabilità del colore è stata notevolmente migliorata. Ma com'è stato possibile ridurre così sostanzialmente il numero di masse, che di norma si aggira intorno a 110 – 120, senza rinunciare alla qualità?

Con 3 accorgimenti:

In primo luogo grazie a una nuova colorazione delle dentine e degli opachi. In questo modo viene meno la necessità di aggiungere masse intensive agli strati base con i colori V-Shade. In secondo luogo grazie a una classificazione più mirata delle masse intensive e incisali. In terzo luogo con una didattica di nuova concezione, che combina in modo intelligente colori, effetti e materiali. Il nuovo sistema completo è contenuto in un'apposita valigetta, con la quale è possibile qualsiasi tipo di restauro.

2.

Tramite l'ottimizzazione dei pigmenti cromatici di Duceram Kiss è stato possibile aumentare notevolmente l'affidabilità dei colori V-Shade. L'ottimizzazione dei pigmenti consente inoltre di ridurre al minimo il problema della metameria, la variazione dell'effetto cromatico a seconda della diversa fonte di luce, per esempio la luce artificiale o la luce del giorno. Anche nel settore Highend, Kiss consente di ottenere un rivestimento di ottima qualità in modo più semplice e più rapido.

3.

La massa opalescente, una componente che influenza il comportamento dinamico e naturale della luce nel restauro, è stata decisamente migliorata tramite un processo produttivo brevettato. Nelle ceramiche classiche, ad alto punto di fusione, l'effetto opalescente può venire meno dopo un numero elevato di cotture. In Duceram Kiss l'opalescenza rimane invece inalterata.



Assortimento essenziale.



Massimo risultato estetico.



Fritta Duceram Kiss dall'effetto opalescente

Duceram Kiss offre la possibilità di definire un livello estetico del tutto personale in base alla struttura del proprio laboratorio. Duceram Kiss consiste di due componenti che possono essere utilizzate separatamente o in stretta connessione:

Linea Estetica Base:

Stratificazione razionale ed economica.

Gli opachi e le dentine sono perfettamente coordinati in quanto a colore, croma, luminosità e fluorescenza. I colori V-Shade possono essere riprodotti facilmente e con precisione, indipendentemente dallo spessore dello strato di dentina. Inoltre, ai colori V-Shade sono associate 6 masse incisali standard, per ottenere un risultato estetico ottimale.


Linea Estetica Individuale:

Il segmento Highend.

Tramite una semplice e predefinita miscelazione con rapporto 1:1 delle masse, si ottengono molte tonalità di colore supplementari, con le quali diventa possibile realizzare restauri naturali anche nei casi più complessi e difficili. Ispirandosi alla natura, DeguDent ha perfezionato ulteriormente l'effetto ottico naturale e dinamico della luce.



Per ulteriori informazioni:
www.defradental.it

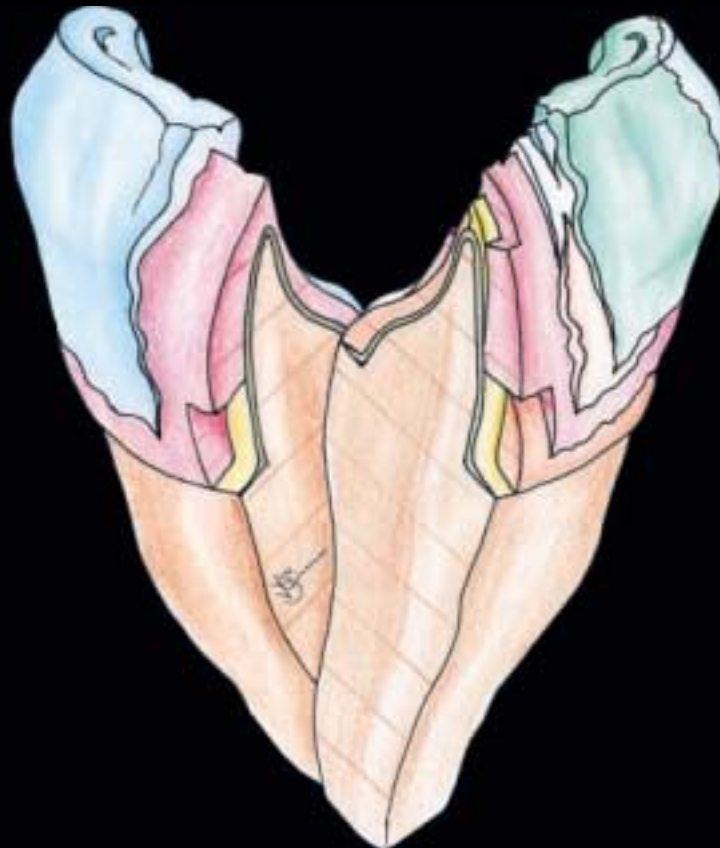

DEFRADENTAL S.p.A.

Via Catania, 3
37138 Verona
Tel. 045-8182811
Fax Numero Verde: 800 309288
E-Mail: customerservice@defradental.it

DeguDent

A Dentsply International Company