

El nuevo concepto cerámico.  
Reducido, perfeccionado, simplemente  
robusto.

Duceram

Keep it simple and safe.



**DENTSPLY**  
MÉXICO

# Reducido, perfeccionado.



## Seis buenas razones para usar el sistema Kiss

1.

**CE 0124** Duceram Kiss es la nueva cerámica de recubrimiento de alta fusión en la gama convencional de CET de 13,8 – 15,4  $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ .

Con sólo 73 masas cerámicas, Duceram Kiss establece un nuevo estándar funcional. Y quien tema que esto repercutirá negativamente sobre la belleza del sistema se llevará una sorpresa agradable, ya que la reproducción de los colores ha mejorado notablemente. ¿Pero, cómo se consigue reducir sustancialmente las 110 – 120 masas habituales en el mercado sin perder calidad?

Con tres claves:

En primer lugar, mediante una nueva pigmentación de las masas de dentina y opáquer. De este modo, en términos generales, ya no se requieren intensificadores para el modelado de colores V básicos. En segundo lugar, mediante una categorización más exacta de los intensificadores y de las masas incisales. En tercer lugar, mediante el desarrollo de una nueva didáctica que combina de manera inteligente los colores, los efectos y los materiales. El nuevo sistema cabe completo en un maletín de diseño. Con él podrá usted resolver el 100 % de las restauraciones.

2.


Gracias a la optimización de los pigmentos, con Duceram Kiss se ha conseguido volver a aumentar de forma importante la fiabilidad cromática en relación con los colores V. Además, la optimización de los pigmentos permite evitar casi por completo el problema del metamerismo, la distinta apariencia de los colores en función de las diversas fuentes de luz, como p. ej. la luz eléctrica o la luz solar. En el sector del high-end, Kiss también le permitirá obtener recubrimientos de máxima calidad de forma más rápida y sencilla.

3.

Las masas opales, uno de los elementos determinantes del comportamiento dinámico y natural con la luz de la restauración, se ha optimizado enormemente mediante un proceso de producción patentado. En las cerámicas de recubrimiento clásicas, de alta fusión, el efecto opalino puede perderse conforme crece el número de cocciones. En Duceram Kiss, dicho efecto persiste visiblemente.



Surtido mínimo.

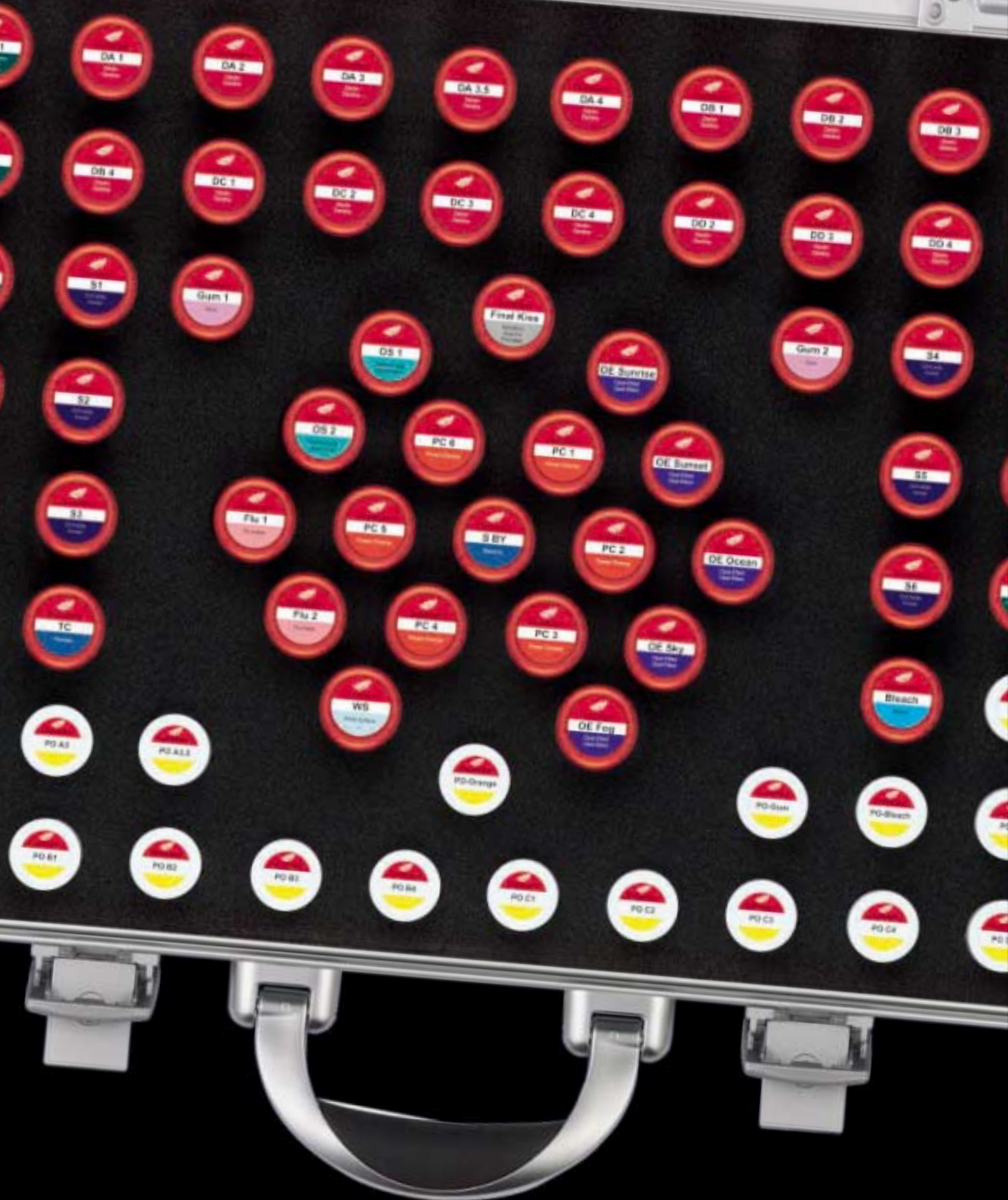

# Máxima estética.



Duceram Kiss frita opalina

Duceram Kiss le da la posibilidad de fijar su propio nivel de estética de forma totalmente personalizada en función de la estructura de su laboratorio dental. Duceram Kiss consta de dos partes fundamentales que pueden emplearse por separado o en estrecha combinación:

## Estética Gama Base:

El modelado eficaz y económico.

Los opáquer y las dentinas se han diseñado con cuidado para que se adapten perfectamente entre sí en cuanto al tono, el color, el brillo y la fluorescencia. Esto permite reproducir fácilmente y con exactitud los colores V con independencia del grosor de la capa de dentina. Además, se han asignado a los colores V seis masas incisales estándar para optimizar la estética del resultado final.

## Estética Gama Individual:

El segmento high-end.

Mediante un sistema simple y predeterminado de mezclas en proporción 1:1 de las distintas masas, usted tendrá a su disposición un gran número de matices cromáticos adicionales con los que podrá realizar restauraciones de aspecto natural incluso en casos complejos y difíciles. Siguiendo las huellas de la naturaleza, DeguDent ha continuado perfeccionando los efectos dinámicos de la luz naturales.

# Simplemente robusta.



4.

Degudent Kiss, la aleación de alto contenido en oro con paladio, ofrece unos excelentes índices de solidez y se procesa con facilidad y rapidez.

- CET bajo, por lo que no se requieren largos períodos de enfriamiento
- alta resistencia al estiraje, por lo que resulta ideal para grandes restauraciones implantológicas
- permite unas altas tasas de calentamiento
- para puentes de cualquier extensión
- óxido de color claro

5.

BiOclus HT, una robusta bio-aleación de probada calidad, se utiliza con éxito desde hace años. Esta aleación está exenta de paladio y cobre y tiene un vivo color dorado.

- Seguro y sencillo en el colado
- Muy buen comportamiento en el pulido
- Fácil y rápido de calentar
- Amplio espectro de indicaciones
- Óxido de color claro

6.

Keep it simple and safe, también éste es el lema que ha guiado el desarrollo de la rueda de colores Kiss. Esta rueda le permite una rápida y sencilla asignación de las correspondientes masas cerámicas Kiss por analogía con los colores V. Una vez establecido el correspondiente color V, todas las demás correlaciones cromáticas aparecen de forma automática en los cinco campos inferiores.

El porcionador Kiss es la prolongación lógica de la rueda de colores e indica las mezclas en proporción 1:1 para la zona de modelado individual, por ejemplo para las masas Power Chromas. El uso del porcionador permite realizar mezclas definidas de dos masas con absoluta reproducibilidad.

Para cualquier otra información:

[www.dentsply.com.mx](http://www.dentsply.com.mx)



Dentsply México, S.A. de C.V.

Calz. Vallejo 846  
Col. Industrial Vallejo  
México D.F. 02300  
Tel. (55) 55 87 64 88  
Fax (55) 53 68 49 46

**DENTSPLY**  
MÉXICO